

CalmDown

by KRUUSE®

GB

CalmDown by KRUUSE® Hole Applicator

Use the hole applicator to create holes in the collar for easy attachment of the CalmDown by KRUUSE® Post-Op Button.

Having to wear a collar can be stressful for cats and dogs. It interferes with their vision, smell and awareness.

The button comforts cats and dogs and has a soothing effect because it mimics the natural comforting pheromones that a mother cat or dog produces to soothe her kittens or puppies.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Choose the appropriate collar for your patient.
2. Place the hole applicator as close to the centre of the non-folded collar as possible, near the neck straps/hole.
3. Make sure to position the hole applicator at the designated stop and punch.
4. Attach the button with the logo facing inward towards your patient.
5. Calming pheromones are released as soon as the button is inserted.

DK

CalmDown by KRUUSE® Hultang






Brug hultangen til at lave huller i kraven, så du nemt kan påsætte en CalmDown by KRUUSE® Post-Op Knap.

Det kan være stressende for katte og hunde at skulle gå med krave. Det forstyrrer deres syn, lugtesans og opmærksomhed.

Knappen har en beroligende effekt på katte og hunde, fordi den efterligner de naturlige feromoner, som en katte- eller hundemor producerer for at berolige sine killinger eller hvalpe.

BRUGSVEJLEDNING:

1. Vælg den rette krave til din patient.
2. Placer hultangen så tæt på midten af den ikke-foldede krave som muligt, i nærheden af nakkestropperne/hullet.
3. Sørg for at placere hultangen korrekt til det naturlige stop og lav hullet.
4. Sæt knappen fast med logoet vendt indad mod patienten.
5. Når knappen sættes i, frigives der straks beroligende feromoner.

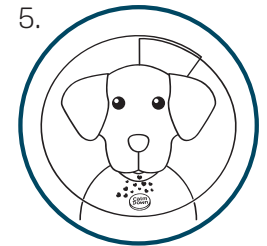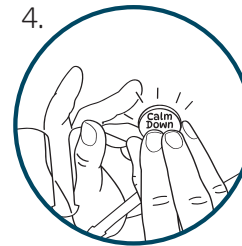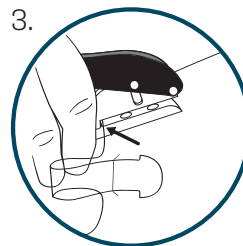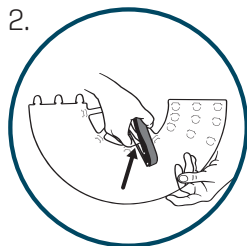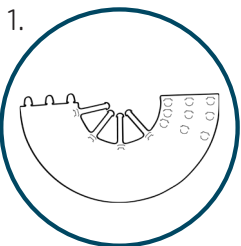

CalmDown

by KRUUSE®

NO

CalmDown by KRUUSE® Hullemaskin

Bruk hullmaskinen til å lage hull i kragen for å gjøre det enkelt å feste CalmDown by KRUUSE® Postoperativ Knapp.

Det kan være stressende for katter og hunder å måtte gå med krage. Det forstyrrer synet, luktesansen og oppmerksomheten deres.

Knappen har en beroligende effekt på katter og hunder fordi den etterlikner de naturlige feromonene som produseres av katte- eller hundemor for å berolige kattungene eller valpene sine.

BRUKSANVISNING:

1. Velg en krage som passer til pasienten.
2. Plasser hullemaskinen så nær midten av den ikke-brettede kragen som mulig, nær nakkestroppene/hullet.
3. Sørg for å plassere hullemaskinen ved det spesifiserte stoppet, og press.
4. Fest knappen med logoen vendt innover mot pasienten.
5. Når knappen festes, frigjøres beroligende feromoner umiddelbart.

SE

CalmDown by KRUUSE® Håltång






Använd håltången för att göra hål i kragen, så att CalmDown by KRUUSE® Postoperativ Knapp enkelt kan fästas.

Att behöva bära en krage kan vara stressande för katter och hundar. Det stör deras syn, luktsinne och medvetenhet.

Knappen får katter och hundar att må bättre och har en lugnande effekt eftersom den efterliknar de naturliga lugnande feromonerna som produceras av en tik eller hona för att lugna sina valpar eller kattungar.

BRUKSANVISNING:

1. Välj lämplig storlek på krage för din patient.
2. Placera håltången så nära mitten av den icke-vikta kragen som möjligt, nära halsremmarna/hålet.
3. Se till att placera håltången vid det avsedda stället för stoppet och stansen.
4. Fäst knappen med logotypen vänd inåt mot patienten.
5. När knappen väl är insatt frigörs lugnande feromoner omedelbart.

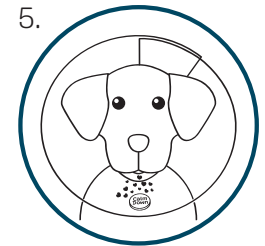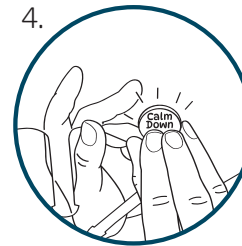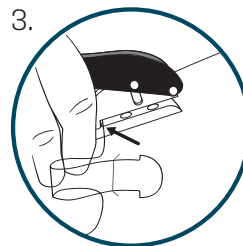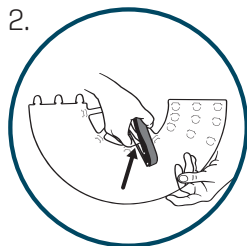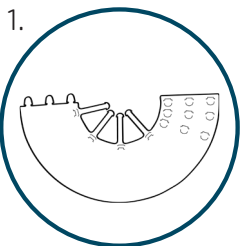

CalmDown

by KRUUSE®

DE

CalmDown by KRUUSE® Lochstanzer






Verwenden Sie den Stanzer, um Löcher in den Halskragen zu stanzen, an denen sich der CalmDown by KRUUSE® Postoperativer Knopf ganz einfach anbringen lässt.

Das Tragen eines Halskragens kann für Katzen und Hunde stressig sein. Es beeinträchtigt ihr Sehvermögen, ihren Geruchssinn und ihre Wahrnehmung.

Der Button hat eine beruhigende Wirkung auf Hunde und Katzen. Diese beruhigende Wirkung beruht auf der Nachahmung der natürlichen, beruhigenden Pheromone, die von Katzen- und Hundemüttern produziert werden, um ihre Welpen zu beruhigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Wählen Sie den passenden Halskragen für Ihren Patienten.
2. Platzieren Sie den Stanzer so nah wie möglich in der Mitte des nicht verdrehten Halskragens in der Nähe des Nackenriemens/Lochs.
3. Achten Sie darauf, den Stanzer bis zum vorgesehenen Anschlag zu positionieren und führen Sie dann den Stanzvorgang durch.
4. Befestigen Sie den Button mit dem Logo nach innen zum Patienten gerichtet.
5. Sobald der Button eingesteckt ist, werden sofort beruhigende Pheromone freigesetzt.

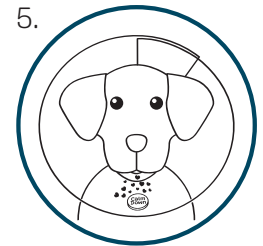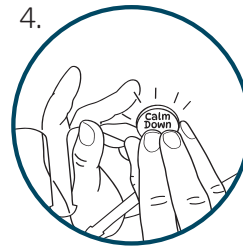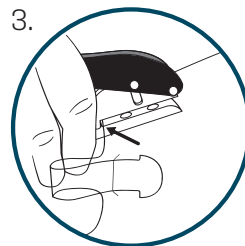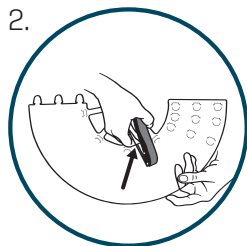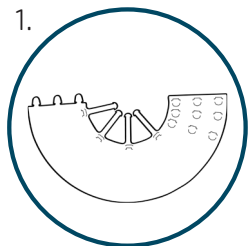

NL

CalmDown by KRUUSE® gatenapplicator

Gebruik de gatenapplicator om gaten in de kraag te maken voor eenvoudige bevestiging van de CalmDown by KRUUSE® Postoperatieve Knop.

Het dragen van een kraag kan stressvol zijn voor katten en honden. Hun zicht, reukvermogen en bewustzijn worden verstoord.

De knop voor e-kraag stelt katten en honden gerust en heeft een kalmerend effect aangezien deze de natuurlijke kalmerende feromonen hond die een poes of een teefje produceert om haar kittens of pups gerust te stellen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Kies de juiste kraag voor uw patiënt.
2. Plaats de gatenapplicator zo dicht mogelijk bij het midden van de niet-opgevouwen kraag, in de buurt van de nekriempjes/-opening.
3. Zorg ervoor dat u de gatenapplicator op de aangegeven stop plaatst en ponst.
4. Bevestig de knop met het logo naar binnen gericht, richting de patiënt.
5. Zodra de knop is ingebracht, komen de kalmerende feromonen onmiddellijk vrij.

CalmDown

by KRUUSE®

ES

Aplicador de agujeros CalmDown by KRUUSE®

Utilice el aplicador de agujeros para hacer orificios en el collar que faciliten la colocación del CalmDown by KRUUSE® Botón posoperatorio.

Tener que llevar collar puede ser estresante para perros y gatos. Interfiere con su visión, olfato y percepción.

El botón reconforta a los gatos y los perros y posee un efecto calmante porque imita las feromonas reconfortantes naturales producidas por una gata o perra lactante para apaciguar a sus cachorros.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Elija el collar adecuado para su paciente.
2. Coloque el aplicador de agujeros lo más cerca posible del centro del cuello sin plegar, cerca de las tiras/agujeros para el cuello.
3. Asegúrese de colocar el aplicador de agujeros en el tope designado y perforo.
4. Coloque el botón con el logotipo mirando hacia adentro, hacia el paciente.
5. Una vez colocado el botón, se liberan inmediatamente feromonas calmantes.

PT

Aplicador de Orifícios CalmDown by KRUUSE®






Utilize o aplicador de furos para criar furos no colar para fácil fixação do CalmDown by KRUUSE® Botão pós-operatório.

O uso de um colar pode ser stressante para os cães e gatos. Interfere na visão, no olfato e na consciência.

O Botão para Colar Isabelino conforta os cães e gatos e tem um efeito calmante porque imita as feromonas reconfortantes naturais produzidos pela mãe cadela ou gata para acalmar as suas crias.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Escolha o colar apropriado para o seu paciente.
2. Coloque o aplicador de furos o mais próximo possível do centro do colar desdobrado, perto das tiras/furo do pescoço.
3. Certifique-se de que posiciona o aplicador de orifícios no batente e na punção designados.
4. Coloque o botão com o logótipo virado para dentro, virado para o paciente.
5. Assim que o botão é inserido, são imediatamente libertadas feromonas calmantes.

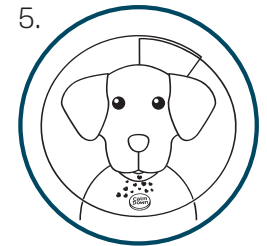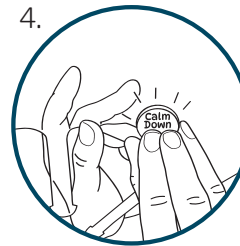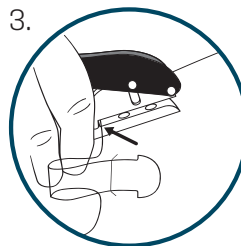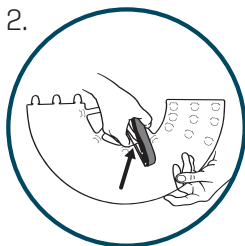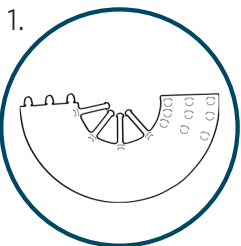

CalmDown

by KRUUSE®

FR

Applicateur de trous CalmDown by KRUUSE®

Utilisez le perforateur pour faire des trous dans le collier et fixer le CalmDown by KRUUSE® Bouton post-opératoire en toute simplicité.

Devoir porter un collier peut être stressant pour les chats et les chiens. Cela interfère avec leur vision, leur odorat et leur conscience.

Le bouton réconforte les chats et les chiens et a un effet apaisant car il imite les phéromones réconfortantes naturelles produites par une maman chat ou chien pour soulager ses chatons ou ses chiots.

Instructions d'utilisation :

1. Choisissez le collier approprié pour votre patient.
2. Placez le perforateur au plus près du centre du collier non plié, à proximité des sangles/orifices.
3. Assurez-vous de positionner l'applicateur de trous à la butée et au poinçon désignés.
4. Fixez le bouton avec le logo vers l'intérieur en direction du patient.
5. Une fois le bouton inséré, les phéromones calmantes sont libérées immédiatement.

IT

Applicatore per fori CalmDown by KRUUSE®






Utilizzare l'applicatore per fori per creare fori nel collare per un agevole fissaggio del CalmDown by KRUUSE® pulsante Post-Op.

Dover indossare un collare può essere stressante per cani e gatti. Interferisce con la vista, l'olfatto e la consapevolezza.

Il Pulsante conforta cani e gatti e ha un effetto lenitivo perché imita i feromoni naturali confortanti prodotti da una mamma gatta o cagnolina per tranquillizzare i suoi gattini o cuccioli.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Scegliere il collare più adatto al proprio paziente.
2. Posizionare l'applicatore per fori il più vicino possibile al centro del collare non piegato, vicino alle cinghie del collo/al foro.
3. Assicurarsi di posizionare l'applicatore del foro fino alla battuta designata e di perforare.
4. Fissare il pulsante con il logo rivolto verso l'interno, in direzione del paziente.
5. Una volta inserito il pulsante, vengono rilasciati immediatamente feromoni calmanti.

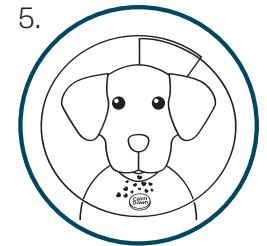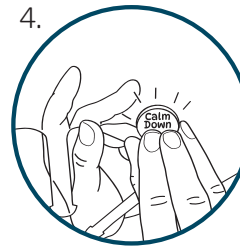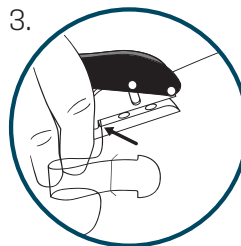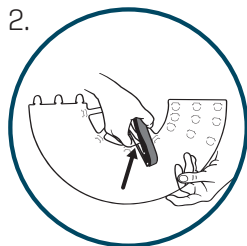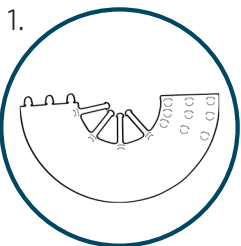

CalmDown

by KRUUSE®

PL

Dziurkacz CalmDown by KRUUSE®

Wykonaj za pomocą dziurkacza otwory w kołnierzu, aby ułatwić mocowanie CalmDown by KRUUSE® dyfuzora pooperacyjnego.

Noszenie kołnierza może być stresujące dla psów i kotów. Kołnierz ogranicza im pole widzenia, odczuwanie zapachu i zmysł orientacji.

Dyfuzor uspokaja koty i psy i ma działanie kojące, ponieważ imituje naturalne feromony uspokajające wydzielane przez matkę kota lub psa, aby złagodzić stres u jej szczeniąt lub kociąt.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Wybierz odpowiedni kołnierz dla swojego pacjenta.
2. Umieść dziurkacz jak najbliżej środka niezłożonej obroży, blisko pasków na szyję/otworu.
3. Upewnij się, że dziurkacz jest ustawiony na wyznaczonym ograniczniku i dziurkaczu.
4. Przymocuj dyfuzor z logo skierowanym do wewnątrz w stronę pacjenta.
5. Po włożeniu dyfuzora natychmiast uwalniane są uspokajające feromony.

FI

CalmDown by KRUUSE® -rei'ittäjä






Tee rei'ittäjällä reikiä kauluriin, jotta CalmDown by KRUUSE® -postoperatiivinen nappi on helppo kiinnittää.

Kaulurin käyttäminen voi olla stressaavaa kissoille ja koirille. Se häiritsee niiden näköä, hajua ja tietoisuutta.

CalmDown by KRUUSE® -postoperatiivinen nappi lohduttaa kissoja ja koiria ja sillä on rauhoittava vaikutus, koska se jäljittelee emokissan tai -koiran tuottamia luonnollisia lohduttavia feromoneja, jotka rauhoittavat kissanpentuja tai pentuja.

KÄYTTÖOHJE:

1. Valitse lemmikillesi sopiva kauluri.
2. Aseta rei'ittäjä mahdollisimman lähelle taittamattoman kaulurin keskikohtaa, lähelle kaulurin kaulahihnaa/reikiä.
3. Varmista, että olet asettanut rei'ittäjän oikeaan kohtaan ja rei'itä kauluri.
4. Kiinnitä nappi logopuoli sisäänpäin lemmikkiä kohti.
5. Kun nappi asetetaan paikalleen, rauhoittavia feromoneja vapautuu välittömästi.

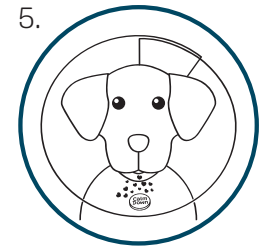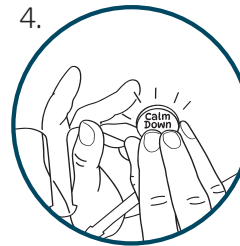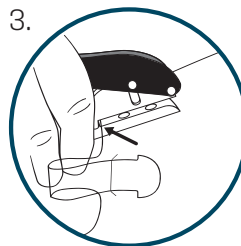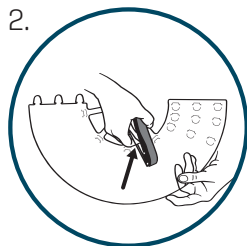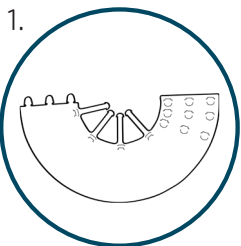

CalmDown

by KRUUSE®

CZ

Nástroj na vytváření otvorů CalmDown by KRUUSE®

Pomocí aplikátoru vyhlubte v límci otvory na snadné připevnění CalmDown by KRUUSE® pooperačního knoflíku.

Nošení límce může být pro kočky a psy stresující. Narušuje jejich vidění, čich a vnímání.

Knoflík uklidňuje kočky a psy a má upokojující účinek, protože napodobuje přirozené uklidňující feromony, které produkuje kočičí nebo psí máma, aby uklidnila svá koťata nebo štěňata.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Vyberte si vhodný límec pro pacienta.
2. Umístěte aplikátor co nejbližší ke středu nesložného límce, poblíž popruhů/otvorů na krku.
3. Ujistěte se, že je nástroj na vytváření otvorů umístěn na určené zarážce a vyražte otvor.
4. Připevněte knoflík s logem směrem dovnitř k pacientovi.
5. Po vložení knoflíku se okamžitě uvolní uklidňující feromony.

HU

CalmDown by KRUUSE® lyukasztó






Használja a lyukasztót, hogy lyukakat készítsen a galléron a CalmDown by KRUUSE® Műtét utáni gomb egyszerű rögzítéséhez.

A gallér viselése stresszes lehet macskák és kutyák számára. Zavarja látásukat, szaglásukat és tudatukat.

A gomb megnyugtatja a macskákat és a kutyákat, és csillapító hatású, mivel utánozza a természetes, nyugalmat adó feromonokat, amelyeket a macska- és kutyanyák termelnek a kiskutyák és kiscicák megnyugtatására.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Válassza ki a megfelelő gallért a beteg számára.
2. Helyezze a lyukasztót a lehető legközelebb a nem összehajtott gallér közepéhez, a nyakpántok/lyuk közelébe.
3. Ügyeljen arra, hogy a lyukasztót a kijelölt álláshoz és lyukasztóhoz pozicionálja.
4. A gombot a logóval befelé, a páciens felé fordítva rögzítse.
5. A gomb behelyezése után a nyugtató feromonok azonnal felszabadulnak.

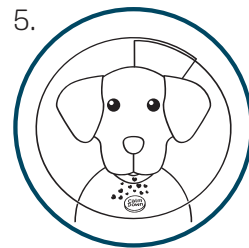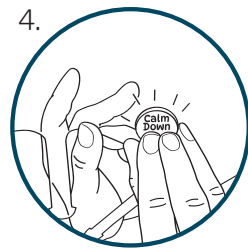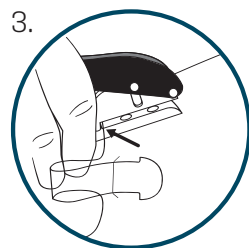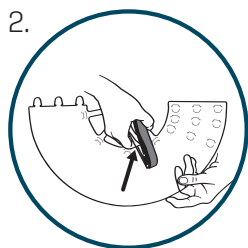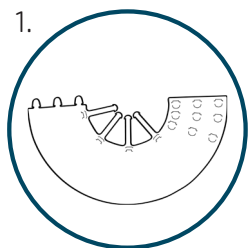

CalmDown

by KRUUSE®

BG

Апликатор за отвори CalmDown by KRUUSE®

Използвайте апликатора за дупки, за да направите дупки в нашияника за лесно закрепване на CalmDown by KRUUSE® Медальон.

Носенето на нашияник може да бъде стресиращо за котките и кучетата. Това пречи на зрението, обонянието и осъзнаването им.

Бутонът успокоява котките и има утешаващ ефект, тъй като имитира естествените успокояващи феромони, произведени от майката котка или куче, за да успокои своите котенца или кученца.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1. Изберете подходящия нашияник за вашия пациент.
2. Поставете апликатора за дупки възможно най-близо до центъра на разгърнатия нашияник, близо до каишките/дупките за закопчаване на врата.
3. Уверете се, че сте поставили апликатора за отвори върху определения ограничител и перфоратор.
4. Прикрепете бутона с логото навътре към пациента.
5. След като бутонът се постави, веднага се освобождават успокояващи феромони.

RO

Perforatorul CalmDown by KRUUSE®






Utilizați perforatorul pentru a crea găuri în guler pentru atașarea ușoară a nasturelui CalmDown by KRUUSE® post-operator.

Purtarea unei zgărzi poate fi stresantă pentru pisici și câini. Aceasta interferează cu vederea, mirosul și conștientizarea lor.

Butonul reconfortează pisicile și câinii și are un efect calmant, deoarece imită feromonii naturali reconfortanți produși de o mamă pisică sau de o mamă câine pentru a-și liniști puii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Alegeți zgarda potrivită pentru pacientul dumneavoastră.
2. Plasați perforatorul cât mai aproape posibil de centrul gulerului nepliat, în apropierea curelelor/găurii pentru gât.
3. Asigurați-vă că poziționați perforatorul de găuri la opritorul indicat și realizați gaura.
4. Atașați butonul cu logo-ul orientat spre interior, către pacient.
5. Odată introdus butonul, feromonii calmanți sunt eliberați imediat.

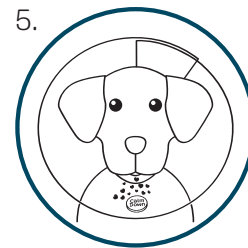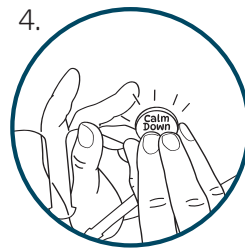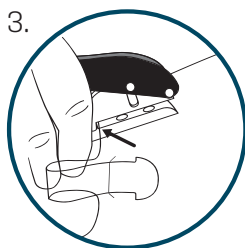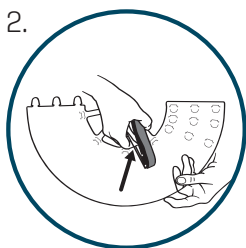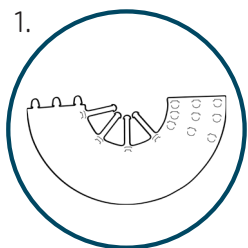

CalmDown

by KRUUSE®

SK

Aplikátor CalmDown by KRUUSE® aplikátor otvorov

Pomocou aplikátora vyhlbte v golieri otvory na jednoduché pripevnenie CalmDown by KRUUSE® pooperačného gombíka.

Nosenie goliera môže u mačiek a psov vyvolať stres. Obmedzuje ich videnie, čuch a ostražitosť.

Gombík CalmDown od KRUUSE® Button má upokojujúci účinok na mačky a psov, pretože napodobňuje prirodzené upokojujúce feromóny, ktoré produkuje mačka alebo sučka, aby upokojili svoje mačiatka alebo šteniatka.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Vyberte vhodný golier pre vášho pacienta.
2. Umiestnite aplikátor čo najbližšie k stredu nezloženého goliera, blízko popruhov/otvoru na krku.
3. Uistite sa, že je aplikátor na vytváranie otvorov umiestnený na určenej zarážke a dierovači.
4. Pripevnite gombík tak, aby logo smerovalo s dovnútra k pacientovi.
5. Po vložení gombíka sa okamžite uvoľnia upokojujúce feromóny.

SL

Aplikator za delanje lukenj CalmDown by KRUUSE®






Z aplikatorjem za izdelovanje lukenj naredite luknje v ovratnici za enostavno pritrditev pooperacijskega gumba CalmDown by KRUUSE®.

Nošenje ovratnice je za mačke in pse lahko stresno. Moti njihov vid, vonj in zaznavanje okolice.

Gumb pomirja mačke in pse in ima blagodejni učinek, saj posnema naravne pomirjajoče feromone, ki jih proizvajata mama mačka ali psička za umirjanje svojih mladičev.

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Izberite primerno ovratnico za vašega pacienta.
2. Aplikator za izdelovanje lukenj namestite čim bližje sredini nezložene ovratnice, blizu vratnih trakov/luknje.
3. Poskrbite, da postavite aplikator za delanje lukenj na določeno mesto in preluknjate.
4. Gumb pritrdite tako, da je logotip obrnjen navznoter proti pacientu.
5. Ko je gumb nameščen, se takoj sprostijo pomirjujoči feromoni.

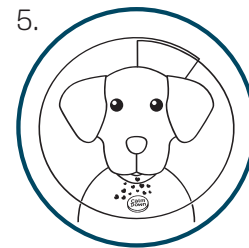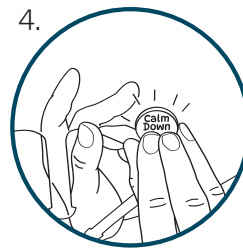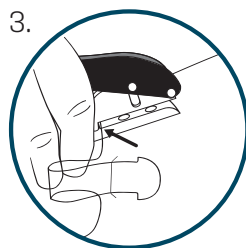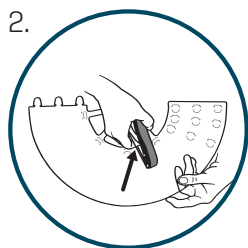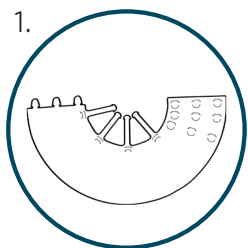



CalmDown

by KRUUSE®

ET

CalmDown by KRUUSE® augustaja

Kasutage kraesse augu tegemiseks aplikaatorit, et CalmDown by KRUUSE® Operatsioonijärgset nuppu* oleks lihtne kinnitada.

Krae kandmine võib kassidele ja koertele stressi tekitada. See häirib nende nägemist, lõhnataju ja meekeerksust.

Nupp lohutab kasse ja koeri ning sellel on rahustav toime, kuna sellest vabanevad feromoonid sarnanevad emase koera või kassi loomulike lohutavate feromoonidega, millega ta rahustab oma poegi.

KASUTUSJUHEND:

1. Valige oma patsiendile sobiv krae.
2. Asetage aplikaator lahtivolditud krae keskmeele võimalikult lähedale, kaelaribade/augu lähedale.
3. Veenduge, et augustaja on ettenähtud asukohas ja tehke seejärel auk.
4. Kinnitage nupp nii, et logo on suunatud patsiendi poole.
5. Kui nupp on paigutatud, vabanevad sellest kohe rahustavad feromoonid.

LV

CalmDown by KRUUSE® caurumotājs






Izmantojiet caurumu aplikatoru, lai izveidotu caurumus apkaklē CalmDown by KRUUSE® Pēcoperācijas pogas vieglai piestiprināšanai.

Nepieciešamība valkāt kakla siksnu var radīt stresu kaķiem un suņiem. Tas traucē viņu redzei, ožai un modrībai.

Poga sniedz komforta sajūtu kaķiem un suņiem, un tai ir nomierinoša iedarbība, jo tā atdarina dabiskos nomierinošos feromonus, kurus izdala kaķu vai suņu mamma, lai nomierinātu savus kaķēnus vai kucēnus.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Izvēlieties savam pacientam piemērotu kakla siksnu.
2. Novietojiet caurumu aplikatoru pēc iespējas tuvāk nesalocītās apkakles centram, netālu no kakla siksnām/cauruma.
3. Pārliedzinieties, vai caurumotājs ir novietots uz norādītās vietas un perforējiet to.
4. Piestipriniet pogu ar logotipu, kas pavērsts uz iekšpusi pret pacientu.
5. Kad poga ir ievietota, nomierinošie feromoni nekavējoties izdalās.

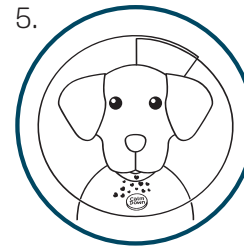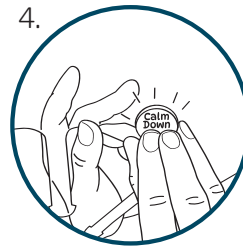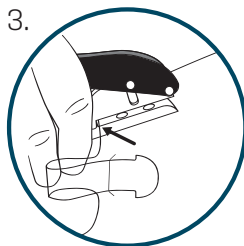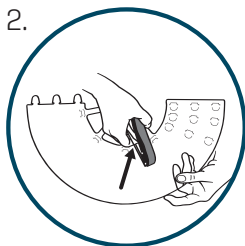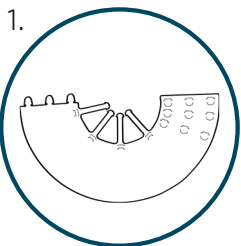

CalmDown

by KRUUSE®

LT

CalmDown by KRUUSE® skylių išmušiklis

Tam, kad būtų lengva pritvirtinti CalmDown by KRUUSE® Pooperacinius mygtukas, naudokite skylių formavimo įrankį, kad apykaklėje padarytumėte papildomų skylių.

Apykaklės dėvėjimas katėms ir šunims gali sukelti stresą. Tai trukdo jų regėjimui, uoslei ir suvokimui.

Mygtukas nuramina kates ir šunis – raminamasis poveikis sukuriamas imituojant natūralius raminamuosius feromonus, kuriuos skleidžia jauniklių susilaukusios katės ir kalės, kad nuramintų savo mažylis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Pasirinkite pacientui tinkamą apykaklę.
2. Skylių formavimo įrankį laikykite kuo arčiau nesulenktos apykaklės centro, šalia kaklo dirželių / tarpo.
3. Įsitikinkite, kad skylių išmušiklis yra numatytoje vietoje ir išmuškite skylę.
4. Mygtuką pritvirtinkite taip, kad logotipas būtų nukreiptas į vidų link paciento.
5. Įdėjus mygtuką, iš karto paskleidžiami raminaieji feromonai.

HR

CalmDown by KRUUSE® Aplikator za rupe






Upotrijebite aplikator za rupe kako biste izradili rupe u ovratniku za jednostavno pričvršćivanje CalmDown by KRUUSE® Gumba nakon operacije.

Nošenje ovratnika može biti stresno za mačke i pse. Ometa njihov vid, miris i orijentaciju.

Gumb za E-ovratnik pruža potporu mačkama i psima te ima ublažavajući učinak jer oponaša prirodne, umirujuće feromone koje proizvode mačka ili pseća majka kako bi umirila svoje mačiće ili štence.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Odaberite odgovarajući ovratnik za svojeg pacijenta.
2. Postavite aplikator za rupe što bliže središtu nepresavinutog ovratnika, blizu remenju/otvoru za vrat.
3. Pazite na to da aplikator za rupe postavite na predviđeni graničnik i izbušite rupe.
4. Pričvrstite gumb tako da logotip bude okrenut prema unutra prema pacijentu.
5. Nakon što se gumb umetne, odmah se oslobađaju umirujućim feromoni.

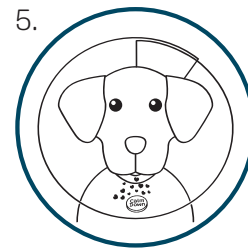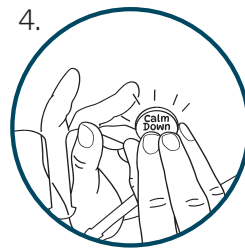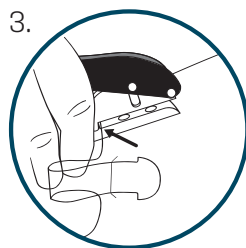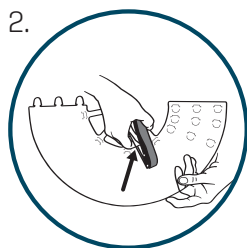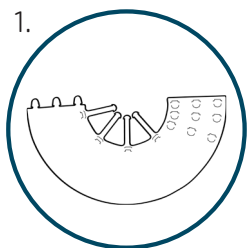

CalmDown

by KRUUSE®

GR

Απλικατέρ οπών CalmDown by KRUUSE®

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο οπών για να δημιουργήσετε οπές στο κολάρο για την εύκολη τοποθέτηση του CalmDown by KRUUSE® μετεχειρητικού κουμπιού.

Η χρήση κολάρου μπορεί να είναι αγχωτική για τις γάτες και τους σκύλους. Παρεμβαίνει στην όραση, την οσμή και την αντίληψή τους.

Το Κουμπί ανακουφίζει τις γάτες και τους σκύλους και έχει μια καταπραϋντική δράση επειδή μιμείται τις φυσικές ανακουφιστικές φερομόνες που παράγονται από μια μαμά-γάτα ή μαμά-σκύλα για να χαλαρώσει τα γατάκια ή τα κουτάβια της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο κολάρο για τον ασθενή σας.
2. Τοποθετήστε το εργαλείο οπών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο του μη διπλωμένου κολάρου, κοντά στους μάντες/στην οπή του λαιμού.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το απλικατέρ οπών στο καθορισμένο στοπ και τρυπήστε.
4. Τοποθετήστε το κουμπί με το λογότυπο στραμμένο προς τα μέσα προς τον ασθενή.
5. Μετά την τοποθέτηση του κουμπιού, απελευθερώνονται αμέσως καταπραϋντικές φερομόνες.

