

DERMICOAT






NL | Gebruiksaanwijzing

EN | User manual

DE | Gebrauchsanweisung

FR | Mode d'emploi



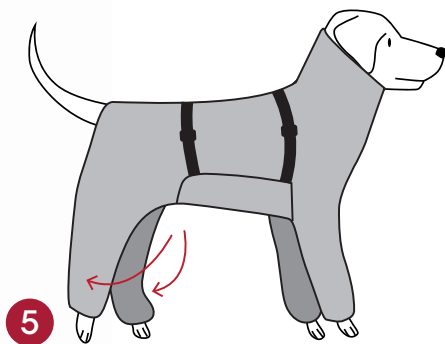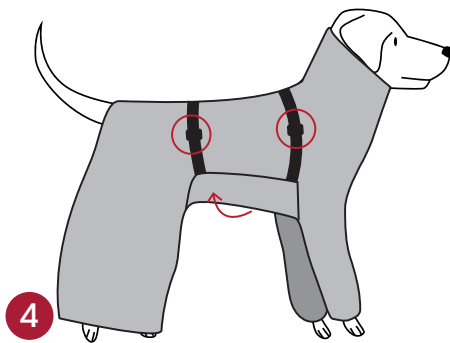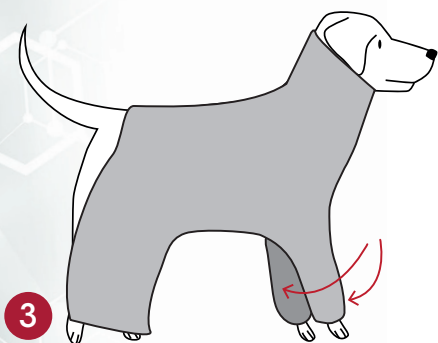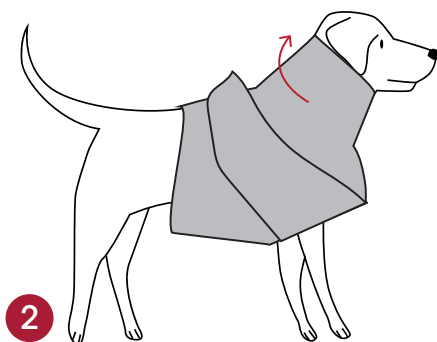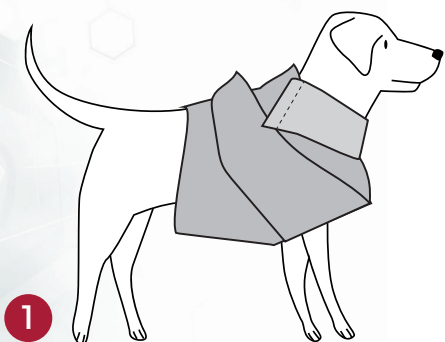

Maxani DermCoat

Voor een effectieve en comfortabele vachtbehandeling

De Maxani DermCoat is speciaal ontwikkeld om het effect van medicinale shampoos te versterken. Dankzij de unieke binnenlaag blijft de shampoo goed op de huid, terwijl uw hond vrij kan bewegen. Zo wordt behandelen eenvoudiger voor u, en prettiger voor uw dier.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Trek de DermCoat over de kop van uw hond.
- 2 Sluit de hals.
- 3 Steek de voorpoten door de openingen.
- 4 Klik de buikflap vast op de rug.
- 5 Sluit tot slot de achterpootflappen.

Wasvoorschrift DermCoat

Wassen op 30°C.
Niet geschikt voor de droger.



Let op

Laat uw hond de DermCoat niet dragen in direct zonlicht of bij warm weer, in verband met risico op oververhitting.

Contact

www.maxani.nl | info@maxani.nl | +31 (0)30 751 70 67

Waarom Maxani huidshampoo bij de DermCoat?

De DermCoat is ontworpen om de werking van huidshampoos te optimaliseren. Maxani biedt verschillende shampoos, afgestemd op uiteenlopende huidtypes en -behoeften. Uw dierenarts adviseert u graag over de juiste keuze.

Welke shampoo gebruikt u?

- 🚩 **Pyomax** - Voor een verstoorde huidflora of geurproblemen
- 🚩 **AtopOat** - Voor de jeukende of allergische huid
- 🚩 **Honey Complex** - Voor droge tot zeer droge huid
- 🚩 **SeboSilk** - Bij een vette, schilferige huid
- 🚩 **Rescue** - Ter ondersteuning bij roodheid of ongemak
- 🚩 **Regular** - Voor regelmatige verzorging van de normale of gevoelige huid

Wasinstructie

Tenzij anders geadviseerd door uw dierenarts:

1. Maak de vacht goed nat (lauwwarm water)
2. Verdun de shampoo (1:5), of breng onverdund aan op probleemplekken
3. Masseer goed in – ook tussen tenen, bij staart en huidplooien
4. Spoel uit en herhaal stap 1, 2 en 3
5. Trek de DermCoat aan
6. Laat 10 minuten inwerken
7. Trek de DermCoat uit
8. Spoel de vacht grondig uit tot het water helder is
9. Dep droog met een zachte handdoek – gebruik geen föhn

Tip: Laat geen laag water in het bad staan - dit verdunt de shampoo en vermindert de werking.

Meer info: www.maxani.nl/wasinstructie

Maxani DermCoat

For effective and comfortable coat treatment

The Maxani DermCoat is specially developed to enhance the effect of medicinal shampoos. Thanks to the unique inner layer, the shampoo stays well on the skin while your dog can move freely. This makes treatment easier for you and more comfortable for your pet.

Instructions for use

- 1 Pull the DermCoat over your dog's head.
- 2 Fasten around the neck.
- 3 Insert the front legs through the openings.
- 4 Attach the belly flap on the back.
- 5 Finally, close the hind leg flaps.

Washing instructions for the DermCoat

Wash at 30°C.
Not suitable for tumble drying.



Note

Do not let your dog wear the DermCoat in direct sunlight or warm weather due to the risk of overheating.

Contact

www.maxani.eu | info@maxani.eu | +31 (0)30 751 70 67

Why use Maxani skin shampoo with the DermCoat?

The DermCoat is designed to optimize the effectiveness of skin shampoos. Maxani offers a range of shampoos tailored to different skin types and needs. Your veterinarian will be happy to advise you on the best choice.

Which shampoo are you using?

- 🚩 **Pyomax** - For disturbed skin flora or odor problems
- 🚩 **AtopOat** - For itchy or allergic skin
- 🚩 **Honey Complex** - For dry to very dry skin
- 🚩 **SeboSilk** - For oily, flaky skin
- 🚩 **Rescue** - To support redness or discomfort
- 🚩 **Regular** - For regular care of normal or sensitive skin

Washing instructions

Unless otherwise advised by your veterinarian:

1. Thoroughly wet the coat (lukewarm water).
2. Dilute the shampoo (1:5), or apply undiluted to problem areas.
3. Massage in well – also between toes, around the tail, and in skin folds.
4. Rinse and repeat steps 1, 2, and 3.
5. Put on the DermCoat.
6. Leave on for 10 minutes.
7. Remove the DermCoat.
8. Rinse the coat thoroughly until the water runs clear.
9. Pat dry with a soft towel – do not use a hairdryer.

Tip: Do not leave a layer of water in the tub – this dilutes the shampoo and reduces effectiveness.

More info: www.maxani.eu/wasinstructie

Maxani DermCoat

Für eine effektive und komfortable Fellbehandlung

Der Maxani DermCoat wurde speziell entwickelt, um die Wirkung medizinischer Shampoos zu verstärken. Dank der einzigartigen Innenschicht bleibt das Shampoo gut auf der Haut haften, während Ihr Hund sich frei bewegen kann. So wird die Behandlung für Sie einfacher und für Ihr Tier angenehmer.

Gebrauchsanweisung

- 1 Ziehen Sie den DermCoat über den Kopf Ihres Hundes.
- 2 Schließen Sie den Halsbereich.
- 3 Stecken Sie die Vorderpfoten durch die Öffnungen.
- 4 Befestigen Sie die Bauchklappe am Rücken.
- 5 Schließen Sie abschließend die Hinterbein-Klappen.

Waschanleitung für den DermCoat

Waschen bei 30°C.
Nicht für den Wäschetrockner geeignet.



Achtung

Lassen Sie Ihren Hund den DermCoat nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder heißem Wetter tragen – Überhitzungsgefahr!

Kontakt

www.maxani.eu | info@maxani.eu | +31 (0)30 751 70 67

Warum Maxani Hautshampoo zusammen mit dem DermCoat?

Der DermCoat wurde entwickelt, um die Wirkung von Hautshampoos zu optimieren. Maxani bietet verschiedene Shampoos, die auf unterschiedliche Hauttypen und -bedürfnisse abgestimmt sind. Ihr Tierarzt berät Sie gerne bei der Auswahl.

Welches Shampoo verwenden Sie?

- 🚩 **Pyomax** - Bei gestörter Hautflora oder Geruchsproblemen
- 🚩 **AtopOat** - Bei juckender oder allergischer Haut
- 🚩 **Honey Complex** - Für trockene bis sehr trockene Haut
- 🚩 **SeboSilk** - Bei fettiger, schuppiger Haut
- 🚩 **Rescue** - Zur Unterstützung bei Rötungen oder Beschwerden
- 🚩 **Regular** - Für die regelmäßige Pflege normaler oder empfindlicher Haut

Waschanleitung

Sofern Ihr Tierarzt nichts anderes empfiehlt:

1. Fell gründlich anfeuchten (lauwarmes Wasser).
2. Shampoo verdünnen (1:5) oder unverdünnt auf Problemstellen auftragen.
3. Gut einmassieren – auch zwischen den Zehen, am Schwanzansatz und in Hautfalten.
4. Ausspülen und Schritte 1, 2 und 3 wiederholen.
5. DermCoat anziehen.
6. 10 Minuten einwirken lassen.
7. DermCoat ausziehen.
8. Fell gründlich ausspülen, bis das Wasser klar ist.
9. Mit einem weichen Handtuch trocken tupfen – keinen Föhn verwenden.

Tipp: Kein Wasser im Bad stehen lassen – dies verdünnt das Shampoo und vermindert die Wirkung.

Mehr Info: www.maxani.nl/wasinstructie

Maxani DermCoat

Pour un traitement du pelage efficace et confortable

Le Maxani DermCoat a été spécialement conçu pour renforcer l'effet des shampoings médicinaux. Grâce à sa couche intérieure unique, le shampoing reste bien en contact avec la peau tout en permettant à votre chien de bouger librement. Ainsi, le traitement est plus facile pour vous et plus agréable pour votre animal.

Mode d'emploi

- 1 Passez le DermCoat par-dessus la tête de votre chien.
- 2 Fermez au niveau du cou.
- 3 Passez les pattes avant dans les ouvertures.
- 4 Fixez le rabat ventral sur le dos.
- 5 Enfin, fermez les rabats pour les pattes arrière.

Instructions de lavage pour le DermCoat

Laver à 30°C.
Ne pas utiliser de sèche-linge.



Attention

Ne laissez pas votre chien porter le DermCoat en plein soleil ou par temps chaud, en raison du risque de surchauffe.

Contact

www.maxani.eu | info@maxani.eu | +31 (0)30 751 70 67

Pourquoi utiliser un shampoing pour la peau Maxani avec le DermCoat ?

Le DermCoat est conçu pour optimiser l'efficacité des shampoings dermatologiques. Maxani propose une gamme de shampoings adaptés aux différents types et besoins de peau. Votre vétérinaire pourra vous conseiller sur le choix le plus approprié.

Quel shampoing utilisez-vous ?

- ❖ **Pyomax** - Pour une flore cutanée déséquilibrée ou des problèmes d'odeur
- ❖ **AtopOat** - Pour la peau qui démange ou allergique
- ❖ **Honey Complex** - Pour la peau sèche à très sèche
- ❖ **SeboSilk** - Pour la peau grasse et squameuse
- ❖ **Rescue** - En soutien en cas de rougeurs ou d'inconfort
- ❖ **Regular** - Pour les soins réguliers de la peau normale ou sensible

Instructions de lavage

Sauf avis contraire de votre vétérinaire :

1. Bien mouiller le pelage (eau tiède).
2. Diluer le shampoing (1:5), ou appliquer pur sur les zones problématiques.
3. Bien masser – y compris entre les doigts, à la base de la queue et dans les plis de la peau.
4. Rincer et répéter les étapes 1, 2 et 3.
5. Mettre le DermCoat.
6. Laisser agir pendant 10 minutes.
7. Retirer le DermCoat.
8. Rincer soigneusement le pelage jusqu'à ce que l'eau soit claire.
9. Sécher en tamponnant avec une serviette douce – ne pas utiliser de sèche-cheveux.

Astuce : Ne laissez pas d'eau stagner dans la baignoire – cela dilue le shampoing et réduit son efficacité.

Plus d'infos: www.maxani.eu/wasinstructie

NL | Wasinstructie

EN | Washing instruction

DE | Waschanleitung

FR | Conseils pour se laver





Specialized Skincare.
Made for Pets.
Trusted by Vets.



Maxani Animal Healthcare

+31 (0)30 751 70 67
info@maxani.eu
www.maxani.eu

